





**Массажная накидка
Woogongsa WKT-9004**



Особенности массажной накидки

1. Массажная накидка имеет особую форму, которая ориентирована на все естественные изгибы человеческого тела.
2. Благодаря тяжёлому весу накидки и мощному мотору постукивающий автоматический массаж по ощущениям напоминает мануальный.
3. Специальные ручки позволяют удобно регулировать расположение массажной накидки на теле, интенсивно прорабатывая необходимую область.
4. Благодаря двум усиленным пружинам в конструкции соленоидов массажный аппарат работает вдвое эффективнее.
5. Массажная накидка изготовлена из надёжных корейских материалов. Мощный мотор и искусственная кожа высокого качества обеспечивают долговечность устройства, а также превосходный внешний вид.
6. 16 программ с различными ритмами и интенсивностью позволяют провести эффективный массаж, соответствующий всем потребностям.
7. Накидка позволяет массировать не только область шеи и спины, но и другие участки тела – например, ягодицы и поясницу.

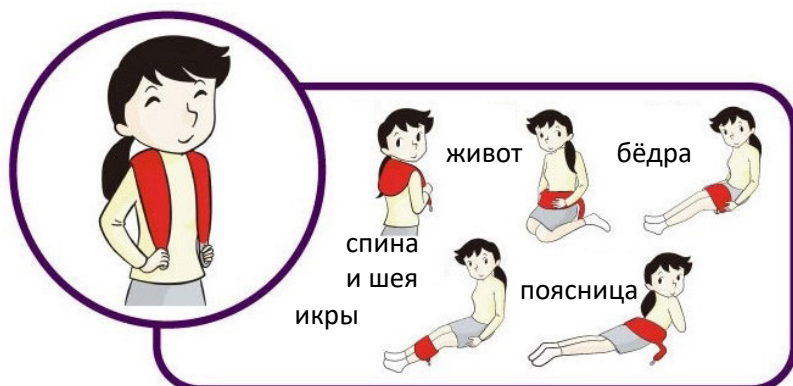

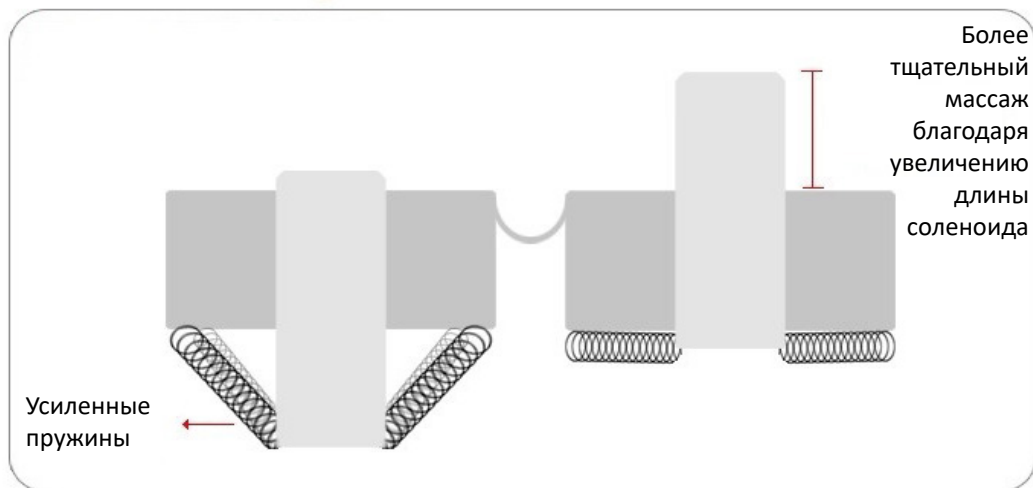

Способ использования и меры предосторожности

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Поместите накидку на плечи, возьмитесь за ручки обеими руками, отрегулируйте так, чтобы накидка находилась в месте, которое вы хотите проработать.
3. Нажмите на кнопку питания, чтобы включить аппарат.
4. Выберите желаемую силу массажа (слабый, средний, сильный, очень сильный) с помощью кнопки выбора.
5. Нажмите на кнопку OFF, чтобы выключить аппарат.

Массажная накидка может использоваться 1–2 раза в день. Каждый сеанс должен длиться не более 5 минут. Сеансы можно проводить подряд друг за другом.

При проведении массажа есть противопоказания. Использование массажной накидки запрещено при сахарном диабете, онкологических заболеваниях, инфекциях в острой стадии, некоторых болезнях сердца и почек, патологиях позвоночника, травмах, нагноениях или ранах в прорабатываемой зоне, а также при использовании электронных имплантов. Пожилым людям и беременным женщинам использовать массажёр можно только под контролем врача.

Возможные неисправности и методы их устранения

1. Устройство не работает.

- Отключите вилку от розетки, затем попробуйте подключить заново;
- Проверьте, правильно ли аппарат подключён к сети. Если вилка подключена к розетке не полностью, работа устройства невозможна. Убедитесь, что вставили вилку до упора;
- В целях защиты от перегрева устройство может отключиться в процессе работы. Попробуйте включить аппарат повторно через 20 минут;
- Если устройство не работает, несмотря на все попытки, обратитесь в авторизованный сервис-центр компании-поставщика.

2. Аппарат функционирует некорректно.

- Включите и выключите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»;
- Если устройство хранилось или доставлено при низкой температуре окружающей среды, аппарат не будет функционировать должным образом. Оставьте устройство не менее чем на 2 часа при комнатной температуре и только после этого используйте;
- Во время использования может пропасть подача тока в электросети. Это не может являться причиной поломки;
- Если массажный аппарат подключён правильно и не охлаждён, но выполнение программ всё равно производится некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании-поставщика.

3. Повреждены вилка или шнур питания.

- Не пытайтесь ремонтировать сами, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании-поставщика.

Важно! При любой неисправности или поломке не пытайтесь ремонтировать массажную накидку самостоятельно. Специальный замок сбоку аппарата предназначен для предотвращения случайного раскрытия. Если пользователь самостоятельно разберёт аппарат, гарантия будет аннулирована, и всё обслуживание в авторизованном сервис-центре будет проводиться только платно.

Характеристики аппарата

Тип прибора	Массажная накидка
Торговая марка	WOOGONGSA
Модель	WKT-9004
Напряжение / Частота	240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	110 Вт
Интенсивность массажа	Слабый, Средний, Сильный, Очень сильный
Количество режимов	16 (шестнадцать)
Размеры аппарата	285 мм × 200 мм × 205 мм (Ш × В × Д)
Размеры упаковки	465 мм × 280 мм × 365 мм (Ш × В × Д)
Вес аппарата / с коробкой	1,7 кг / 6,67 кг
Сертификация	EAC, EMS, GMP, KCC (Korea)
Гарантийный срок	1 год

Изготовитель: «Vitagram Co., Ltd.», Республика Корея, 18-21, Anygol-gil, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do 10301

Адрес места производства: Республика Корея, Vitagram Co., Ltd., 18-21, Anygol-gil, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do 10301

Тел.: +82 1566-0201

Дата производства: см. стикер на корпусе аппарата

Импортер: ООО «ВС Трейд», 197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 18, лит. А, пом. 7-Н, тел. +7 812 988-3809, vs.trade.spb@gmail.com

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделие подлежит сдаче на утилизацию в пункт приема электрического и электронного оборудования.

Гарантийный талон

Чтобы удостовериться, что изделие Woogongsa предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Woogongsa в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение, обратившись в авторизованный сервис-центр на сайте **welbu.ru**

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте welbu.ru/remont по телефону 8(800) 222-32-11 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@welbu.ru

СЕРВИС-ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА WOOGONGSA В РФ: www.welbu.ru/remont

Модель: Woogongsa WKT-9004

Серийный номер (serial no): _____

Дата продажи: _____
(печать или штамп продавца)

Фирма-продавец: _____

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предъявлении заполненного гарантийного талона. Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, при отсутствии печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен: _____
(подпись покупателя)



Информацию о соответствии можно получить на сайте welbu.ru. Срок службы данного изделия равен сроку гарантии и отсчитывается с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации и применяемым техническим стандартам.

Условия гарантии

Гарантия сроком в 1 год предоставляется владельцу массажной накидки Woogongsa WKT-9004. Гарантия распространяется только на брак производства. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей. Если во время использования прибора в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной производителем ремонтной организации;
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Woogongsa – то есть ту, которая была предназначена Woogongsa для реализации на территории РФ и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя. При нелегальном ввозе продукции нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности.

Авторизованные сервисные центры Woogongsa не осуществляют гарантийную поддержку продукции Woogongsa, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех сервис-центрах Woogongsa, контактная информация которых указана в гарантийном талоне на странице 6.

