



Беспроводной
ручной массажер



K-5000E

Поздравляем с покупкой ручного массажного аппарата K-5000E!

Инструкция по эксплуатации обеспечивает
безопасное и удобное использование.

Инструкция включает в себя описание работы массажного аппарата
производства крупной корейской компании **WelbuTech**.

Содержание

Необходимо знать перед использованием.....	4
Перед началом работы.....	5
Меры предосторожности.....	5
Комплектация.....	7
Особенности массажных насадок и их применение.....	7
Возможные неисправности и методы их устранения.....	8
Технические характеристики.....	9
Гарантийный талон.....	10
Условия гарантии.....	11

Необходимо знать перед использованием

WelbuTech K-5000E – это беспроводной массажный аппарат ручного типа с пятью различными насадками для массажа тела: ног, ступней, ягодиц, рук, кистей, плеч, шеи и спины.

Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под наблюдением и/или будучи проинструктированными касательно использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором. Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

Во избежание угрозы здоровью следует соблюдать указанные ниже рекомендации по безопасности при эксплуатации устройства.

Производитель не несет ответственности за несчастные случаи, а также за дефекты и неисправности причиной которых явилось несоблюдение пунктов данной инструкции по эксплуатации.

Внимание!

Пожалуйста, перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если вы состоите у него на учете или чувствуете недомогание, а также если имеются симптомы и болезни, перечисленные ниже:

- Психические расстройства;
- Злокачественные опухоли;
- Повышенная температура тела;
- Бактериальные, вирусные и грибковые инфекции;
- Нарушение равновесия;
- Патологии позвоночного столба;
- Ревматические заболевания: остеоартроз, подагра, остеопороз;
- Переломы, травмы, раны и нагноения в массируемой зоне;
- Кожные заболевания;
- Частые мышечные спазмы в икрах и бедрах;
- Сердечная недостаточность;
- Заболевания почек и мочевыделительной системы;
- Тромбоз и тяжелые формы варикозного расширения вен;
- Электронные медицинские имплантированные приборы.

Перед началом работы

1. Распаковка

- Достаньте прибор из коробки и выполните проверку;
- Тщательно осмотрите прибор и комплектующие на предмет механических повреждений;
- Убедитесь в наличии всех комплектующих, указанных в разделе «Комплектация» на странице 7.

2. Обратите внимание перед использованием

- Перед использованием этого прибора необходимо прочитать все инструкции и предупреждения. Аппарат необходимо применять только по назначению, как описано в данном руководстве;
- Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, если вы уже получаете лечение;
- Светодиодный индикатор заряда батареи находится на корпусе массажера. Не используйте массажер, если его аккумулятор поврежден. Свяжитесь с сервисным центром для устранения повреждений;
- Не пользуйтесь устройством более 15 минут подряд и более 3 раз в сутки.

3. Подготовка к работе.


- Зарядите устройство. Убедитесь, что ваш источник питания соответствует характеристикам массажного аппарата: 220–240 В, 50/60 Гц. Пользуйтесь комплектным зарядным устройством – DC 11,1 В / 1,4 А;
- Перед использованием отсоедините шнур питания от массажера.

Меры предосторожности


- Используйте аппарат только по назначению, как описано в данном руководстве;
- Не используйте другие аппараты совместно с этим устройством;
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания зарядного устройства (невыполнение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током);
- Не ставьте тяжелые предметы на прибор, не роняйте его с высоты и не подвергайте ударам;
- Не используйте прибор, если аккумулятор поврежден (это может привести к удару электрическим током или пожару);
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не используйте прибор в местах с повышенной влажностью и температурой;
- Не рекомендуется использовать прибор более 15 минут подряд и более 3 раз в день одному человеку. Любое чрезмерное или длительное использование может вызвать появление синяков и/или болезненных ощущений;
- Прибор может не функционировать при низких температурах и должен

- находиться в помещении с комнатной температурой в течение минимум 2-х часов перед началом любых действий;
- Во время работы устройства внимательно следите за детьми и домашними животными;
 - Этот аппарат предназначен для использования только людьми;
 - Не используйте прибор в помещениях с легковоспламеняющимися и/или взрывоопасными жидкостями, газами;
 - Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно. Несоблюдение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током и аннулированию гарантии;
 - Во время использования массажного аппарата мышцы массируемой части тела должны быть расслаблены. Несоблюдение этого требования может привести к травме или повреждению прибора;
 - Если вода попала на устройство случайно или вы получили травму, немедленно прекратите его использование и отключите от сети;
 - Если аппарат был поврежден, немедленно прекратите использование и отключите его от сети. Обратитесь в авторизованный сервисный центр;
 - Не тяните зарядное устройство из розетки за шнур. Это может привести к повреждению шнура, пожару или неисправности;
 - Прибор всегда должен оставаться выключенным, если не используется;
 - Не беритесь за шнур питания зарядного устройства или сам адаптер мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током;
 - При передаче прибора другому лицу передайте вместе с ним и инструкцию по эксплуатации;
 - Прибор не предназначен для использования большим количеством людей. Ответственность за использование аппарата в общественном месте лежит на пользователе. В случае возникновения неисправности, аппарат нельзя будет поменять или вернуть, т. к. данное использование не будет покрываться гарантией;
 - Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендуется использовать аппарат с осторожностью, т. к. давление может оказаться для них слишком сильным;
 - Удаляйте пыль и загрязнения с устройства по мере их возникновения, храните прибор в сухом месте;
 - Между различными электронными устройствами могут возникать электромагнитные или другие помехи, поэтому рекомендуется использовать данные массажные устройства как можно дальше от других электронных устройств;
 - Массажер следует использовать только с прикрепленной насадкой. Использование массажера без нее ведет за собой потерю гарантии.

Комплектация

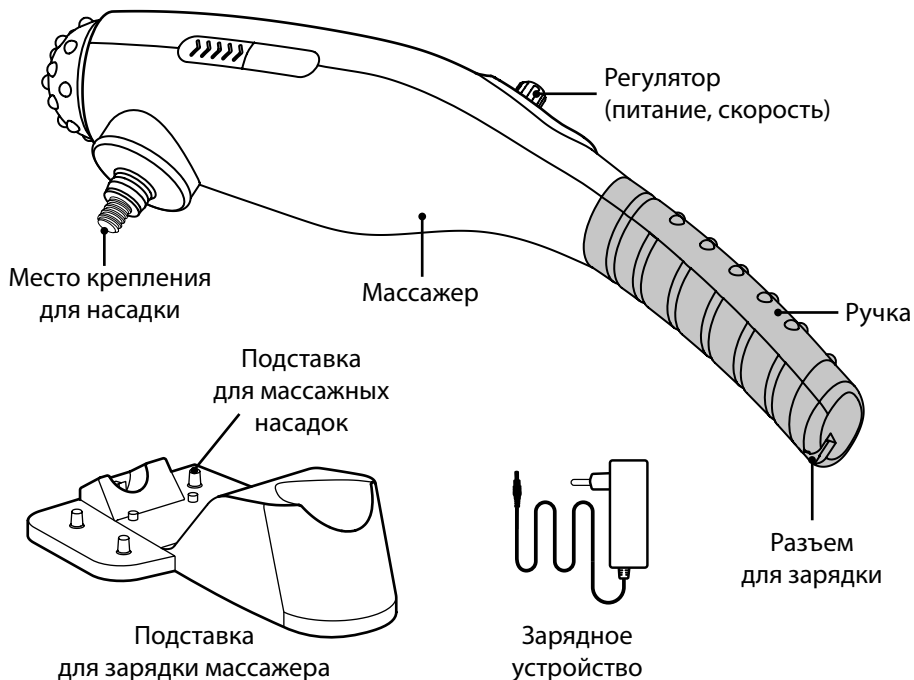


Особенности массажных насадок и их применение

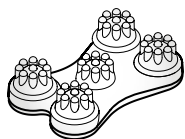

Насадка с 5 роликами

5 роликов позволяют эффективно массировать широкие части тела: плечо, спину, живот, икры и т. д.

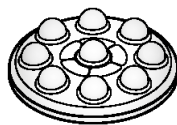

Стимулирующая насадка

Многофункциональная насадка. Подходит для массажа любых частей тела.



Насадка-лопатка

Позволяет эффективно прорабатывать зоны естественных изгибов тела: область плеч и шеи.



Выпуклая насадка

Подходит для массажа всего тела. Можно регулировать силу воздействия, надавливая сильнее или слабее.



Насадка-палец

Подходит для акупрессурного массажа. Имитирует эффект надавливания пальцем – точечного массажа.

Возможные неисправности и методы их устранения

1. Аппарат не работает.

- Зарядите аппарат, затем попробуйте подключить заново;
- Проверьте, правильно ли было подключено зарядное устройство к аппарату во время зарядки. Если штекер был подключен не полностью, выпал во время зарядки или не был подключен вовсе, прибор работать не будет. В этом случае необходимо зарядить аппарат;
- Если аппарат не работает, несмотря на все попытки, обратитесь в авторизованный сервис-центр компании-поставщика (welbu.ru).

2. Аппарат функционирует некорректно.

- Включите и выключите аппарат, повернув регулятор;
- Если аппарат хранился или доставлен при низкой температуре окружающей среды, он не будет функционировать должным образом. Оставьте его не менее чем на 2 часа при комнатной температуре и только после этого используйте;
- В случае, если аккумулятор был заряжен, насадка соединена правильно, а аппарат не функционирует должным образом, обратитесь в сервисный центр;
- Во время зарядки может пропасть подача тока в электросети. Это не может являться причиной поломки.

3. В случае повреждения штекера или шнура зарядного устройства.

- Не пытайтесь ремонтировать сами, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании-поставщика (welbu.ru).

Технические характеристики

Тип прибора	Массажер ручной беспроводной
Торговая марка	WELBUTECH
Модель	K-5000E
Напряжение / частота сети	220–240 В / 50–60 Гц
Напряжение для зарядки аккумулятора	DC 11,1 В / 1,4 А (через зарядное устройство)
Потребляемая мощность	30 Вт
Скорость	4300 об/мин
Насадки для массажа	5-роликовая, стимулирующая, лопатка, палец, выпуклая
Емкость аккумулятора	2600 мА (Li-ion)
Время работы аккумулятора	150 мин (при полной зарядке)
Размеры аппарата	150 мм × 150 мм × 415 мм (Ш × В × Д)
Размеры упаковки	155 мм × 190 мм × 430 мм (Ш × В × Д)
Вес аппарата / с коробкой	1,22 кг / 2,07 кг
Сертификация	EAC, CE, KCC (Korea)
Гарантийный срок	1 год

Изготовитель: «Welbutech Co., Ltd.», Республика Корея, 14, Baekbeom-ro 677 beon-gil, Seo-gu, Incheon

Адрес места производства: Республика Корея, Welbutech Co., Ltd., 14, Baekbeom-ro 677 beon-gil, Seo-gu, Incheon

Тел.: +82 32 870-0900, +82 32 870-0939

Дата производства: см. стикер на корпусе аппарата (формат – месяц ГГГГ)

Импортер: ООО «МаксТрейд», 188663, РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, корп. 361 А, пом. 182, тел. +7 (931) 337-6057, chilikin.maxx@gmail.com

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделие подлежит сдаче на утилизацию в пункт приема электрического и электронного оборудования.

Гарантийный талон

Чтобы удостовериться, что изделие WelbuTech предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией WelbuTech в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение, обратившись в авторизованный сервис-центр на сайте **welbu.ru**

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте welbu.ru/remont по телефону 8(800) 222-32-11 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@welbu.ru

СЕРВИС-ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА WELBUTECH В РФ:

www.welbu.ru/remont

Модель: Welbutech K-5000E

Серийный номер (serial no): _____

Дата продажи: _____
(печать или штамп продавца)

Фирма-продавец: _____

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предъявлении заполненного гарантийного талона. Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, при отсутствии печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен: _____
(подпись покупателя)



Информацию о соответствии можно получить на сайте welbu.ru. Срок службы данного изделия равен сроку гарантии и отсчитывается с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации и применяемым техническим стандартам.

Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу массажного аппарата WelbuTech. На двигатель и электрические компоненты устройства при домашнем использовании распространяется гарантийный срок в 1 (один) год с даты покупки. Гарантийный срок на все аксессуары – 1 (один) год. Гарантия распространяется только на брак производства. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей. Если во время использования прибора в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией WELBUTECH ремонтной организации;
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
6. Внесения несогласованных с WELBUTECH изменений в конструкцию.

Приобретайте официально поставляемую продукцию WELBUTECH – то есть ту, которая была предназначена WELBUTECH для реализации на территории РФ и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя. При нелегальном ввозе продукции нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры WELBUTECH не осуществляют гарантийную поддержку продукции WELBUTECH, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех сервис-центрах WELBUTECH, контактная информация которых указана в гарантийном талоне на странице 10.



Производитель: WELBUTECH Co., Ltd.

Адрес производителя:

Республика Корея, Бэббом-ро, 14, Бонгиль 677, Сео-гу, г. Инчхон

Сделано в Южной Корее



WelbuTech

Официальный представитель в России

welbu.ru